


ESOSOFT S

ELETTROCATETERE ESOFAGEO IN SILICONE CON CONNESSIONI TOUCH PROOF
SILICONE ESOPHAGEAL LEAD WITH TOUCH PROOF CONNECTIONS

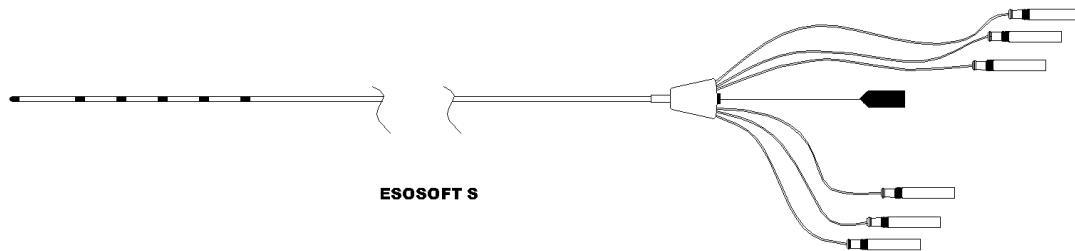

Elettrocatteter nasale in Silicone con mandrino per stimolazione cardiaca transesofagea e studi elettrofisiologici (SETE). ESOSOFT S offre un'elevata compliance grazie alla sua morbidezza, alla punta atraumatica ed al montaggio in corpo unico degli elettrodi. Il mandrino ne facilita l'introduzione ed il veloce posizionamento. Le caratteristiche del prodotto sono frutto della ricca esperienza clinica sulla metodica. I modelli multipolari, collegati con idonea strumentazione, permettono la stimolazione e la contemporanea registrazione del segnale atriale. Prodotto senza lattice.

Nasal silicone lead with stilet for cardiac esophageal stimulation and electrophysiologic studies. ESOSOFT S ensures patient compliance due to its softness, non-traumatic tip and single-body structure. The stilet permits an easier introduction and positioning. The technical features come forth from a large clinical experience with this method. Multipolar models when connected with an esophageal stimulating device permit to pace and to record, at the same time, the ECG signal from the left atrium. Latex free.

MODELLO MODEL	ESOSOFT 2S	ESOSOFT 3S	ESOSOFT 4S	ESOSOFT 5S	ESOSOFT 6S
REF.	35125S	35135S	35145S	35155S	35165S
NUMERO DI POLI NUMBER OF POLES	2	3	4	5	6
DISTANZA INTERELETTRODICA mm DISTANCE BETWEEN ELECTRODES mm	30	30/15	30/15/15	20/15÷15	20/15÷15
LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH	85 cm				
LUNGHEZZA UTILE USABLE LENGTH	60 cm				
PUNTA TIP	Atraumatica in SILICONE, Ø=3mm - L. 7,3mm Non-traumatic SILICONE, Ø=3mm - L. 7,3mm				
MATERIALE ELETTRODI ELECTRODE MATERIAL	ACCIAIO AISI AISI Stainless Steel				
SUPERFICIE ELETTRODICA ELECTRODE AREA	47mm ² per ogni elettrodo 47mm ² for each electrode				
MATERIALE CORPO BODY MATERIAL	SILICONE di grado medicale - Spirale interna quadrifilare in MP35N Medical grade SILICONE - Internal quadrifilar coil of MP35N				
Ø DEL CORPO BODY DIAMETER	3,0mm – 9 French				
CONNESSIONE CONNECTION	2mm maschio dorati numerati 1 ÷ 6 di tipo touch proof (EN 60601-1) Touch proof (EN 60601-1) gold plated 2 mm plugs numbered 1 ÷ 6				
MANDRINI - STYLETS	2 mandrini: Ø 0,35mm e 0,40mm - 2 stylets: Ø 0,35mm and 0,40mm				
CONFORMITA' ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe IIA Directive 93/42/EEC (D.L. 46/97). Class IIA device				

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

REF.	35125S	35135S	35145S	35155S	35165S
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	5 unità per ogni scatola 5 units per box				
CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Singola in doppia busta sigillata (interna carta-PE / esterna tyvek-PE) Double sealed pouches (paper-PE internal / tyvek-PE external)				
STERILIZZAZIONE STERILIZATION	Sterilizzato ad Ossido di Etilene Sterilized with Ethylene Oxide				
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: 0°C ÷ +50°C – Umidità relativa: 10% ÷ 90% Temperature: 0°C ÷ +50°C – Relative Humidity 10% ÷ 90%				
SCADENZA EXPIRATION DATE	48 mesi dalla data di sterilizzazione 48 months after sterilization date				